

SERIE 400

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 402



CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec toile, articulée en 4 parties (dossier, assise, jambes et pieds) réglable par vérins à blocage hydraulique à commande déportée ou bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables inclinées
- 1 barrière de pieds
- 1 matelas grand confort 4 parties forme baquet bicolore dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 3 sangles de sécurité avec boucle plastique
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 4 roues Ø 200
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 895

Poids

- 34,5 kg (brancard + matelas + barrières)



Options d'usine


- Plan dur sous matelas
- Barrière de pieds renforcée
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 8 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Couche amovible
- Béquilles spéciales pour chargement hauteur 50 cm au lieu de 60 cm
- Kit de reprise de charge
- Roues pivotantes avant avec blocage directionnel par commande aux pieds
- Roues pivotantes arrière avec blocage directionnel par commande aux pieds

Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants
- Support spéciaux de tablette cardio (3 appuis) pour couche articulée
- Porte-bouteille O² 1m³ (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Sangle de sécurité avec boucle métallique
- Adaptation arrière pour système d'ancrage S310
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g



Vue des différentes positions d'utilisation :

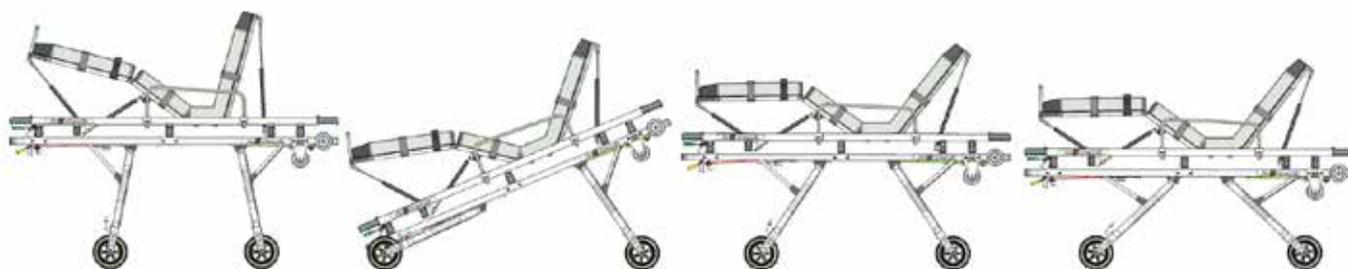


Position roulage / brancardage

Position béquille arrière repliée

Position intermédiaire 1
Ht : 795 mm

Position intermédiaire 2
Ht : 695 mm

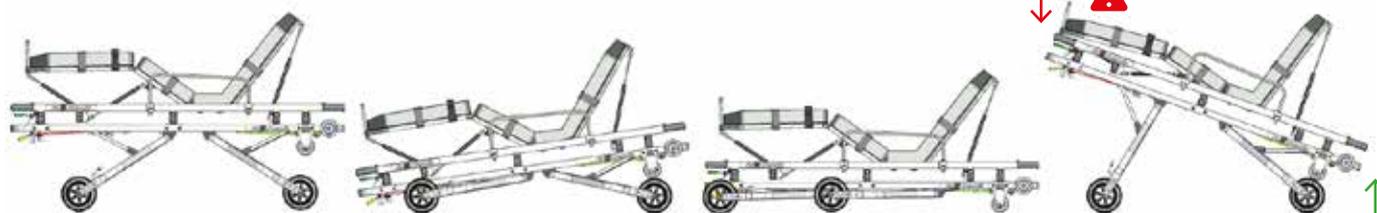

Position intermédiaire 3
Ht : 595 mm

Position intermédiaire 4

Position ambulance

Position déconseillée

Plan du brancard

