

SERIE 200

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 230 CF M




GROUPE UTAC CERAM

CONFORME À LA NORME NF EN 1865
TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. N°11/07475

CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 3 parties (dossier, assise et jambes) réglable par tirants mécaniques
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds
- 1 matelas grand confort 5 parties forme baquet bicolore dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté par vérins
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 50 cm
- Charge maximum conseillée : 160 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 275
- Hauteur déplié : 775

Poids

- 34 Kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

Normes

Conforme à la norme
NF EN 1865

Testé et validé par 

selon la norme NF EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. n°11/07475



Options d'usine

- Couleur spécifique
- Vérin de dossier (en lieu et place du tirant mécanique) sur version 230 CF Mécanité avec manette de commande latérale ou derrière le dossier
- Barrière de pieds renforcée
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 9 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Double commande de vérin de dossier
- Positions intermédiaires sur béquille arrière sur demande

Accessoires disponibles


- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Porte-bouteille 0² 1m³ (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Caisson de rangement sur série 200, couche fixe, sous le dossier uniquement
- Système d'ancrage 3 point S310, testé et validé 10g



Vue des différentes positions d'utilisation :



Position brancardage

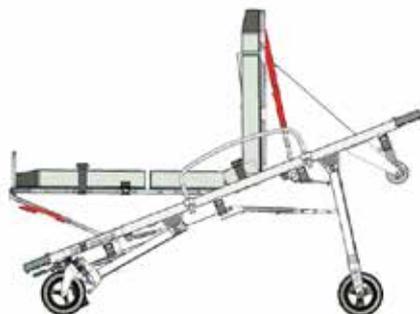

Position béquille arrière repliée



Position ambulance


Vue des différentes positions intermédiaires (sur demande) :



Position intermédiaire 1



Position intermédiaire 2

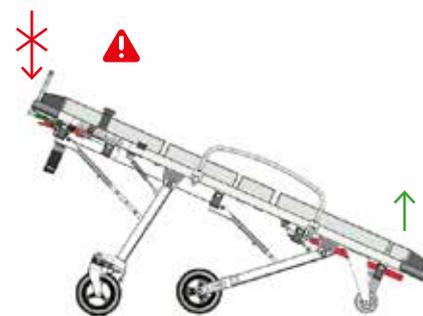

Position déconseillée

Plan du brancard

