

SERIE 400

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 420 CF M VINTAGE



CONFORME À LA NORME NF EN 1865

TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789

§ 4.5.9 : P.V. N°14/03604

CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition brute (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 2 parties (dossier et jambes) réglable par tirants mécaniques
- 2 barrières latérales rabattables droites H160 mm
- 1 barrière de pieds renforcée
- 1 matelas confort 3 parties plat épaisseur 7 cm, monocolore au choix : Vert, Bleu, Orange, Jaune, Mauve ou Rose
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 55 cm
- Charge maximum conseillée: 200 Kg
(Testé à 250 Kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 845

Poids

- 45,5 kg (brancard + matelas
+ barrières + systèmes d'attache)

Normes

Conforme à la norme
NF EN 1865

Testé et validé par  UTAC CERAM
selon la norme NF EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. n°14/03604



Options d'usine

- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort
(épaisseur 8 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Vérin de dossier (en lieu et place du tirant mécanique)
avec manette de commande latérale
- Kit de reprise de charge
- Barrière de pieds renforcée
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- Couche articulée en 4 ou 5 parties
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel

Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Porte-bouteille O² 1m3 (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Caisson de rangement série 400 couche fixe (sous le dossier uniquement)
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10g



Vue des différentes positions d'utilisation :




Position roulage /
brancardage

Position béquille
arrière repliée

Position intermédiaire 1
Ht : 745 mm

Position intermédiaire 2
Ht : 645 mm

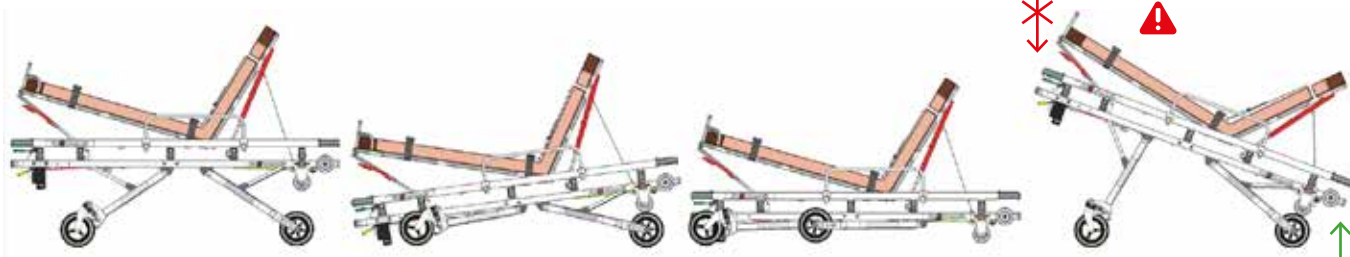

Position intermédiaire 3
Ht : 545 mm

Position intermédiaire 4

Position ambulance

Position déconseillée

Plan du brancard

