

SERIE 400

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 440 CF



CONFORME À LA NORME NF EN 1865

TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789

§ 4.5.9 : P.V. N°11/06083

CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 4 parties (Dossier, assise, jambes et pieds) réglable par vérins à blocage hydraulique à commande déportée ou bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds renforcée
- 1 matelas grand confort 5 parties forme baquet, bicolore, dessus 1 couleur au choix : bleu, vert, jaune, rouge ou gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10 g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 895

Poids

- 44,5 kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

Normes

Conforme à la norme
NF EN 1865

Testé et validé par  UTAC CERAM
selon la norme NF EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. n°11/06083



Options d'usine

- Couleur spécifique
- Couche amovible
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 9 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Double commande de vérin de dossier (droite et gauche) – restriction sur manette à la tête
- Béquilles spéciales pour chargement hauteur 50 cm au lieu de 60 cm
- Kit de reprise de charge
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel

Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants pour transfert latéral du patient
- Support spéciaux de tablette cardio (3 appuis) pour couche articulée
- Porte-bouteille Ø2 1m³ (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (pieds)
- Caisson de rangement série 400 couche fixe sous le dossier uniquement
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g




Vue des différentes positions d'utilisation :



Position roulage /
brancardage



Position béquille
arrière repliée

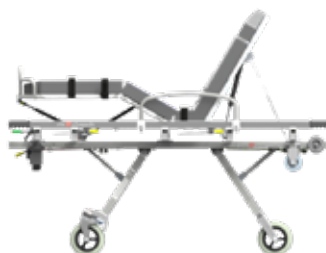

Position intermédiaire 1
Ht : 795 mm



Position intermédiaire 2
Ht : 695 mm



Position intermédiaire 3
Ht : 595 mm



Position intermédiaire 4



Position ambulance



Position déconseillée

Plan du brancard

